


TL-06

Protocolli Applicativi

Dipendenza dose-effetto

Typical dose response to red light therapy

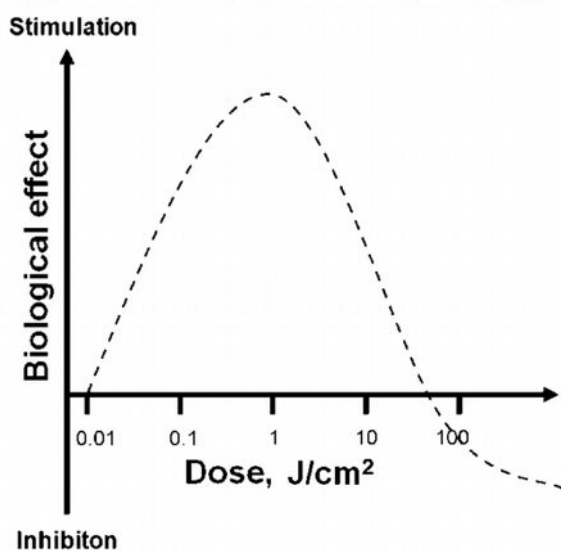

La letteratura concorda per una dose ottimale compresa tra $0.1\text{J}/\text{cm}^2$ to $6\text{J}/\text{cm}^2$, con dosaggi inferiori di nessuna efficacia e dosaggi superiori che ne cancellano l'efficacia.

Nel caso del dispositivo TL-06 la dose ottimale si ottiene con una esposizione di **20 minuti** ad una distanza di **10-15 cm**.

Test di sensibilita' cutanea

E' consigliabile effettuare un test di sensibilita' cutanea prima di effettuare un ciclo di trattamenti, per escludere l' eventualita' (rara) di una condizione di fotosensibilizzazione, dovuta per esempio all' assunzione di farmaci o retinoidi.

Esecuzione del test.

- Applicare TL-06 **a contatto** della cute dell'avambraccio.
- Attivare l'emissione per 5 minuti.
- Controllare la cute nelle successive 4 ore.
- Se si manifestano arrossamenti persistenti (ovvero che persistono dopo 4 ore) , allora si ha una condizione di fotosensibilizzazione.

Fintanto che permane la fotosensibilizzazione e' **sconsigliato** effettuare trattamenti con TL-06.

Sicurezza del trattamento.

L' emissione del TL-06 (luce non coerente rossa – 630 nm) non e' in grado di produrre danni agli occhi e alla cute. Si puo' usare con sicurezza nella zona oculare, curando di mantenere le palpebre chiuse , per evitare fenomeni di abbagliamento.

Per un migliore comfort di trattamento utilizzare gli occhialini di protezione forniti a corredo.

Protocollo Anti-Aging

- Detergere accuratamente la cute rimuovendo ogni traccia di make-up o di prodotti di protezione solare.
- Indossare gli occhiali di protezione.
- Posizionare TL-06 ad una distanza di 15 cm e attivare l' emissione per 20 minuti.

Regime di trattamento:

- per i primi 40/60 giorni effettuare 1 trattamento al giorno
- successivamente i trattamenti si possono diradare a 2/3 per settimana
- si consiglia di effettuare fotografie in condizioni standard per documentare i risultati.

I risultati si manifestano in media dopo 6-8 settimane di trattamento.

Protocollo Attenuazione del Dolore

- Indossare (eventualmente) gli occhiali di protezione
- Posizionare TL-06 ad una distanza di 15 cm e attivare l' emissione per 20 minuti.

Regime di trattamento:

- effettuare 1 o 2 trattamenti al giorno

Normalmente i risultati si manifestano dopo 6/8 sedute.